


Leveransbesked Journalia AK


Denna version innehåller några utvecklingar samt flertalet rättningsärenden. Nedan ser du de förändringar som har störst synlig påverkan på systemet.

Utvecklingar i systemet

Bevakningslista

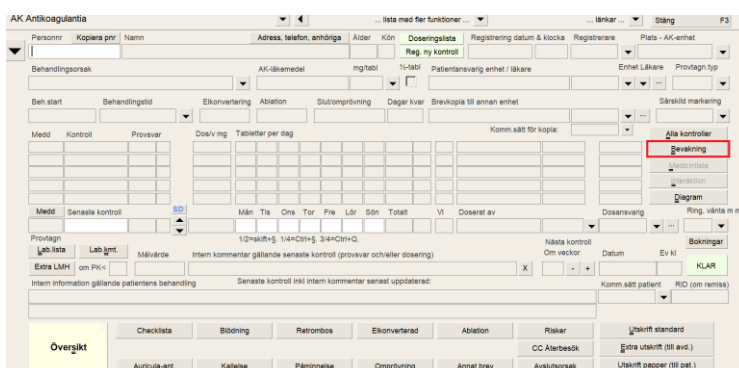


Bevakningsknappen ger om inget namn eller personnummer är ifyllt samma funktion som bevakningslista.

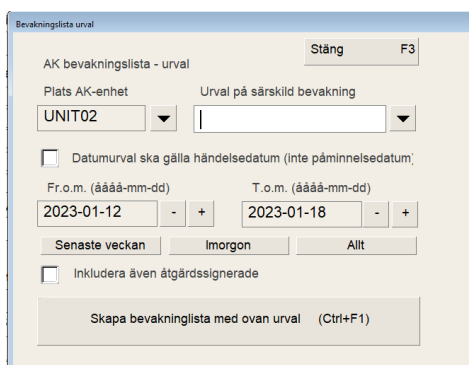

I funktionen för urval för bevakningar visas en kryssruta för att även kunna inkludera åtgärdade bevakningar, "Inkludera även åtgärdssignerade".

Snabbvalsfunktion för val av datum. Valet Allt fångar även felregistrerade datum.

Införa Bevakning

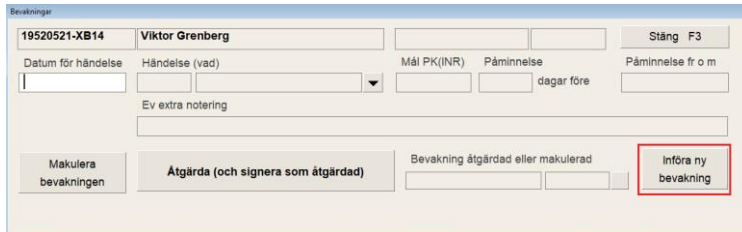

Mall för meddelande + brevmall döljs vid registrering av ny bevakning. Meddelande väljs i stället via funktionen för meddelande [Medd.] på patientens doserings sida.


Knapp [Införa ny bevakning] har lagts till. Då en registrerad bevakning redan finns för patienten är det ett förenklat flöde för att kunna registrera ytterligare bevakning.

Översikten




I Översikt är rutorna grå och utan siffra för att undvika misstolkning om datum är ifyllt vid analys.


Är datum ifyllt gäller precis som tidigare att information visas för patienter med registrerad kontroll för valt datum.

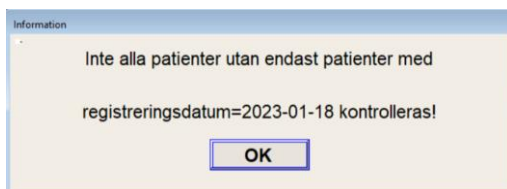


Informationsmeddelande visas vid sökning med datum för att uppmärksamma att sökning ej gäller alla patienter utan endast de med registrering det valda datumet inkluderas.

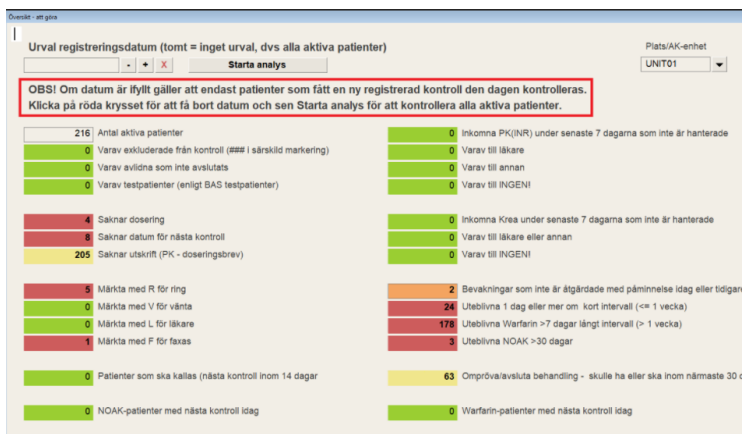

Mer information i form av hjälptext visas på skärmen: OBS! Om datum ifyllt gäller att endast patienter som fått en ny registrerad kontroll den dagen kontrolleras. Klicka på röda krysser för att få bort datum och sen Starta analys för att kontrollera alla aktiva patienter.
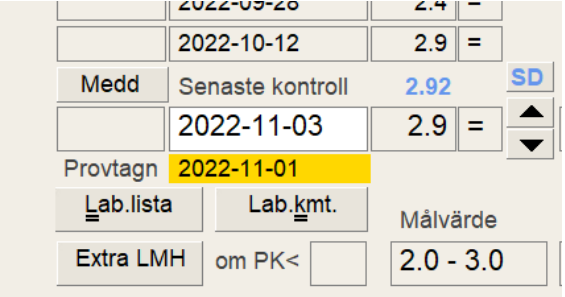
<table border="1"> <tr><td>71</td><td>Inkomna PK(INR)</td><td>under senaste 7 dagarna som inte är hanterade</td></tr> <tr><td>0</td><td>Varav till läkare</td><td></td></tr> <tr><td>0</td><td>Varav till annan</td><td></td></tr> <tr><td>0</td><td>Varav till INGEN!</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td>Inkomna Krea</td><td>under senaste 7 dagarna som inte är hanterade</td></tr> <tr><td>0</td><td>Varav till läkare eller annan</td><td></td></tr> <tr><td>0</td><td>Varav till INGEN!</td><td></td></tr> </table>	71	Inkomna PK(INR)	under senaste 7 dagarna som inte är hanterade	0	Varav till läkare		0	Varav till annan		0	Varav till INGEN!		3	Inkomna Krea	under senaste 7 dagarna som inte är hanterade	0	Varav till läkare eller annan		0	Varav till INGEN!		<p>Förtydligande av kriterier för vilka provsvar som visas vid analys i översikten.</p>
71	Inkomna PK(INR)	under senaste 7 dagarna som inte är hanterade																				
0	Varav till läkare																					
0	Varav till annan																					
0	Varav till INGEN!																					
3	Inkomna Krea	under senaste 7 dagarna som inte är hanterade																				
0	Varav till läkare eller annan																					
0	Varav till INGEN!																					
<p>AK Monitor Provtagningsdatum</p> 	<p>En färgmarkering visas om provtagningsdatum inte är samma som datum för senaste kontroll.</p> <p>Turkos om dagen före aktuell dag.</p> <p>Gul om tidigare (dvs "gammalt provsvar" > 2 dagar)</p> <p>Röd om senare (felregistrering).</p> <p>Tillägg av text med benämning: Provtagn visas före datum för att tydliggöra att datumet avser provtagningsdatum.</p>																					

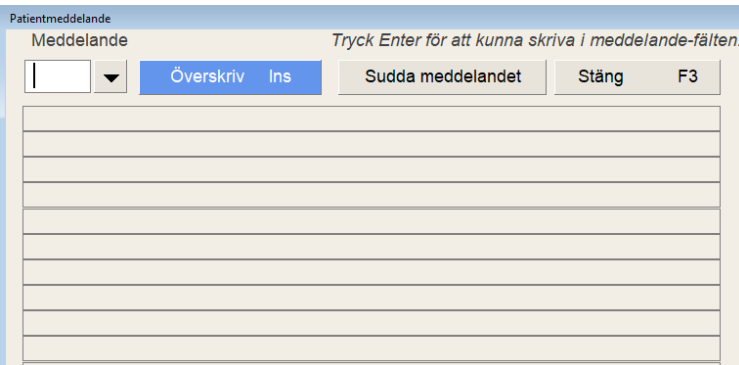Felrättningar av tidigare problem	
<p>Meddelande</p> 	<p>Problem med att korrigera i valda meddelande till patient har åtgärdats med hjälp av ny knapp: [Överskriv Ins] för att förenkla överskrift/inför läge av text.</p> <p>Är knappen blå gäller överskrivningsläge. Är knappen grå gäller inför läge. Klicka på knappen för att ändra läge. Samma funktion som insert-knappen på skrivbordet.</p>

Skrivläge återställs

AK Antikoagulantia ... lista med fler funktioner ..

Personnr Kopiera pnr Namn Adress, telefon, anhöriga Ålder Kön Doseringslista

▼ 19480526-XB12 Hans Grenberg 74 M Reg. ny kontroll

Behandlingsorsak OBS! Läsläge. AK-läkemedel B01AA03 mg/tabli W ½-tabli Patientans

FF Primärprev. Waran 2.5

Beh. start Behandlingstid Eikonvertering Ablation Slut/omprövning Dagar kvar Brevkopla

2020-05-05 Tills vidare 2005-05-18 2023-07-14 177

Läsläge återställs automatiskt till Skrivläge utan att AK monitor stängs då exempelvis patient varit låst av annan användare.

Meddelande +H> visas ej korrekt

	2022-11-16	2.3 =	27.50	2	1	2	1	2	1	2	11.00	W	W	2.5	1	JANRA	GUSAN
I14>	2022-11-23	2.3 =	27.50	2	1	2	1	2	1	2	11.00	W	W	2.5	1	ASN102	GUSAN
	2022-12-12	2.3 =	27.50	2	1	2	1	2	1	2	11.00	W	W	2.5	1	ASN102	
+H >	2023-01-18	2.4 =	27.50	2	1	2	1	2	1	2	11.00	W	W	2.5	1	ASN102	

Må Ti On To Fr Lø Sø

Medd	Kontroll	INR
	2022-11-02	
	2022-11-09	
	2022-11-16	
I14>	2022-11-23	
	2022-12-12	
Medd	Senaste kontroll	
+H >	2023-01-18	
Provtagn		

Problem med att meddelande +H> i flödet för lågt PK och "ordinera extra lmh" inte sparades i Alla kontroller är åtgärdat.

Det synliggörs i Alla kontroller att koden extra LMH (+H>) har använts när LMH har ordinerats med detta meddelande.

Uppgift om +H> visas även på patientens doseringssida och detta gäller vid ordination av extra LMH både i flöde för lågt pk samt genom att trycka på knappen för extra LMH.

Översikten – gammalt meddelande som hänger kvar

19430315-XB11 Olov Larsson

2022-05-31	Dosering	M:	I:	V:	P:
2022-06-02	Dosering	M:	I: 4.1	V:	P:
2022-06-07	Dosering	M:	I: 1.6	V:	P:
2022-06-10	Dosering	M: I14>	I: 2.1	V:	P: UNIT02

P.g.a. ditt kommande ingrepp 2023-01-25 behövs tillfällig anpassning av din antikoagulantia-behandling - antal tabletter per dag:

Datum	Waran	LMH
2023-01-22 sön	0	
2023-01-23 mån	0	
2023-01-24 tis	0	
2023-01-25 ons	???	
2023-01-26 tor	???	
2023-01-27 fre	???	

Fortsätt med tills PK>1.8
Ordinarie doseringsschema för Waran från 2023-01-27

2023-01-18	Dosering	M:	I: 2.4	V:	P: UNIT02
------------	----------	----	--------	----	-----------

Problem med att delar av ett gammalt meddelande hänger kvar och visas flera gånger i översikten även när nytt meddelande lagts till är nu åtgärdat. Informationen som synliggörs i Översikten visas också nu mer strukturerat.

Lablista – felmeddelande åtgärdat

19610401-XB66	Anaa Karlsson				
Lista patientens alla provsvar					
AK/LMH 1	Sida 1 av 2				
P-PK(INR)				2.0	
P-PK(INR) kapillärt					
Vikt	kg			se VAS	
Längd	cm			155	
Kroppsyta (DuBois)	m2				
P-Kreatinin	µmol/L	50-90		74	
Pt-eGFR(LM-rev)/1.73 ²	mL/min			71	
Pt-eGFR(LM-rev)	mL/min				
P-CystatinC					
Pt-GFR(CystatinC)/1,73m2	mL/min	75-160			
Pt-eGFR(CystatinC)	mL/min				
P-Dabigatran					

Problem när icke numeriska värden angetts har gett felmeddelande – Division med 0.

I funktionen för längd, vikt, kreatinin och cystatin-c är detta problem nu åtgärdat det går således att ange text i dessa fält men det bör uppmärksammas att funktion för uträkning av gfr då ej fungerar och dessa rutor blir därför gråmarkerade.

Återstart av tidigare avslutad patient

Patienten har avslutats
1 Bara läsa
2 Fortsätt behandling
3 Ny behandling
4 Ny behandling med gamla prover
5 Avbryt

Vid uppstart av en tidigare avslutad/inaktiverad patient hade vissa fält innehåll av gamla uppgifter kvar som ej var aktuella. Detta är nu åtgärdat och fälten rensas upp i olika omfattning beroende på val: Ny behandling eller Ny behandling med gamla provsvar.

Uppgift om patientansvarig enhet/läkare, brevkopia till annan enhet, särskild markering och intern information gällande patientens behandling kvarstår.

Vid återstart av behandling bör ny behandling väljas ej fortsatt behandling.