

Sabine Fröhnert
Huvudjournal och hälsoinformatik

Datum
2026-09-03


Version
2.0

LIV – Listor i vården - Loggkontroll

LIV är en applikation för arbetslistor med patientuppgifter som används i vården. LIV ersätter möjligheten att spara sådana listor i G-katalogen. Applikationen kräver att man har behörighet till varje enskild lista. Behörighet tilldelas av administratör. För att komma in i applikationen krävs SITHS-inlogg. LIV nås via <https://liv.regionhalland.se>

Startsidan


Här syns de senaste listorna som den inloggade personen har varit inne i. I listen ovanför finns de alternativ för behörighetsnivå som är knutet till SITHS-inlogget. Man kan alltid komma tillbaka till startsidan genom att trycka på alternativet **Startsida** i listen.

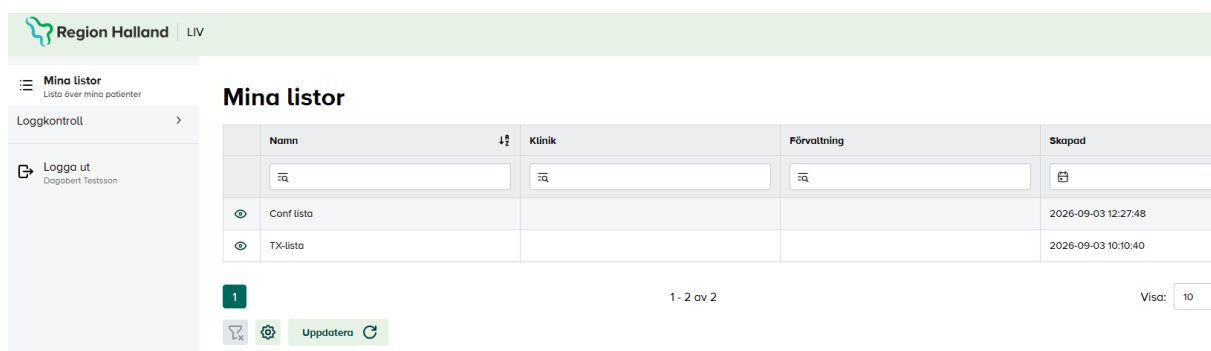

Namn	Klinik	Förvaltning	Skapad
Conf lista			2026-09-03 12:27:48
TX-lista			2026-09-03 10:10:40

Loggkontroll

1. Klicka på **Loggkontroll** i sidomenyn och tillgängliga alternativ för loggkontrollanten visas.

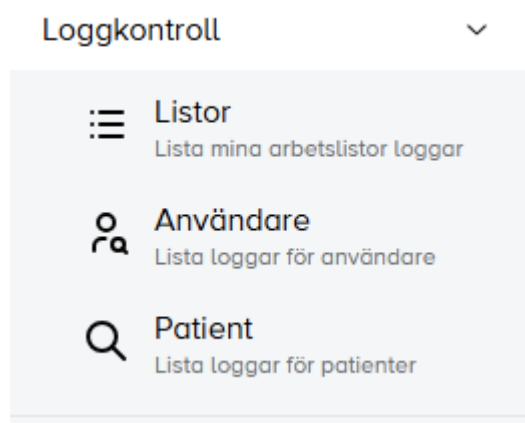


- Listor**
Lista mina arbetslistor loggar
- Användare**
Lista loggar för användare
- Patient**
Lista loggar för patienter

- De olika sätten att utföra en loggkontroll är via specifik användare eller via specifik patient. Det finns även möjlighet att se händelser i en specifik lista.

Loggkontroll specifik lista

- Klicka på **Loggkontroll** och välj därefter **Listor**.

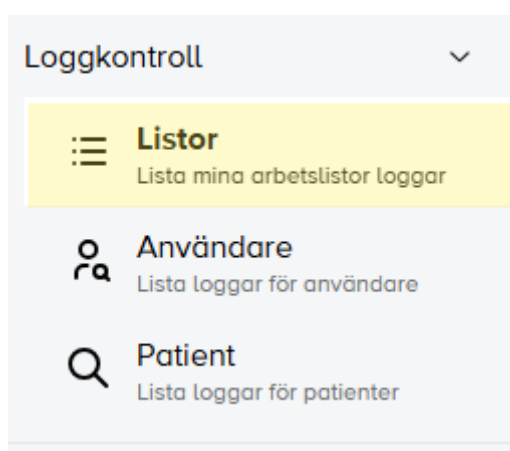

- Mina loggkontrollistor** öppnas och är en vy över de listor man har funktionen loggkontrollant.

Mina loggkontrollistor

	Namn	Klinik	Förvaltning	Skapad
	Conf lista			2026-09-03 12:27:48

1 1 - 1 av 1 Visa: 10

Uppdatera

- Tryck till vänster om den lista som ska kontrolleras. I fönstret som öppnas ses **Behöriga användare** och en logglista – **Händelser**.

[Tillbaka mina loggkontrollistor](#)

Behöriga användare

HSA-ID	Namn
Sök	Sök
SE2321000115-116357	Dagobert Testsson
SE2321000115-116381	Hero Testsson

1

1 - 2 av 2

Visa:

10



Uppdatera




Händelser

Tidpunkt	HSA-ID	Användare	Händelse
Sök	Sök	Sök	Sök
2026-09-03 13:53:12	SE2321000115-116355	Benny Testsson	Behörighetsgrupp ändrades till
2026-09-03 13:03:58	SE2321000115-116381	Hero Testsson	Se radfärg
2026-09-03 13:03:58	SE2321000115-116381	Hero Testsson	Visa lista

Loggkontroll specifik användare

1. Klicka på **Loggkontroll** och välj därefter **Användare**.

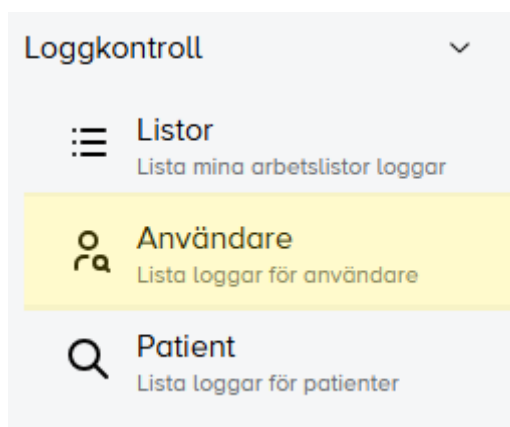

2. Fönstret **Loggkontroll för användare** visas. Användare söks ut genom att ange HSAID, användarnamn tryck därefter **Loggkontrollera**.

Loggkontroll för användare

Ange HSA-ID eller användarnamn *

abc123 eller SE2321000115-1

Loggkontrollera 🔍

3. Har man rättighet att loggkontrollera en användare så får man upp en komplett lista över de händelser som är kopplade till användaren i systemet.

Loggkontroll för användare

Ange HSA-ID eller användarnamn *


atn112 ✕

Loggkontrollera 🔍

Tidpunkt	HSA-ID	Användare	Händelse	Personnummer	Arbetslista
2026-09-04 11:16:47	SE2321000115-116354	Alvar Testsson	Visa lista		TX-lista
2026-09-04 11:16:45	SE2321000115-116354	Alvar Testsson	Visa lista		TX-lista
2026-09-04 11:16:45	SE2321000115-116354	Alvar Testsson	Se post	19760707-2381	TX-lista

Loggkontroll specifik patient

1. Klicka på **Loggkontroll** och välj därefter **Patient** i menyn.

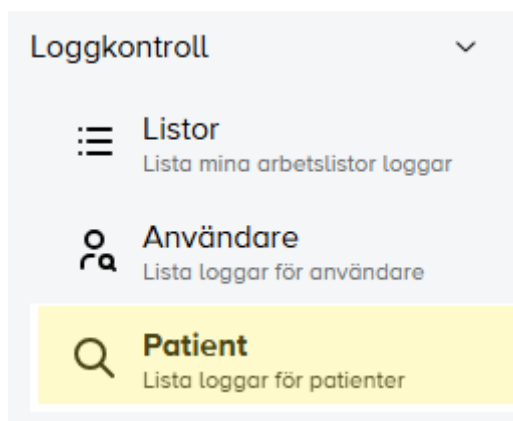

2. Fönstret **Loggkontroll för patient** öppnas. Ange personnummer för aktuell patient (ÅÅÅÅMMDD-NNNN) och tryck **Loggkontrollera**.

Loggkontroll för patient

Ange personnummer *

YYYYMMDD-XXXX

Loggkontrollera 🔍

- 3. En totalvy visas med de poster användaren finns registrerad i.
- 4. På samma sätt som för sökningen för en användare så kan man se vilka användare samt vilken arbetslista det skett en förändring i. Sortering görs direkt i listan.

Tidpunkt	HSA-ID	Användare	Händelse	Personnummer	Arbetslista
					
2026-09-04 09:23:01	SE2321000115-116354	Alvar Testsson	Se post	19840921-9287	TX-lista
2026-09-04 09:23:01	SE2321000115-116354	Alvar Testsson	Återaktivera post	19840921-9287	TX-lista
2026-09-04 09:22:59	SE2321000115-116354	Alvar Testsson	Se post	19840921-9287	TX-lista
2026-09-04 09:22:55	SE2321000115-116354	Alvar Testsson	Se post	19840921-9287	TX-lista
2026-09-04 09:22:55	SE2321000115-116354	Alvar Testsson	Radera post	19840921-9287	TX-lista
2026-09-04 09:22:54	SE2321000115-116354	Alvar Testsson	Se post	19840921-9287	TX-lista